

Identification of Forensic Fabrics Using a Portable Raman Spectrometer

At a crime scene, a police officer collects a fiber sample that may prove to be invaluable evidence in identifying a criminal or exonerating an innocent person. While FTIR has been used for analysis in the past, the strong absorption of the fabric or the glass slide where it is mounted makes the spectrum very hard to interpret. In recent years, Raman spectroscopy

has been studied extensively for forensic fiber analysis because of the high selectivity of Raman signatures, non-destruction nature of the test, and the ability to conduct the analysis without any sample preparation. The Raman test can be performed directly on fabrics or fibers mounted on glass slide with very little interference from the mounting resin or the glass.

EXPERIMENTAL

In this study, six types of undyed fabric samples were tested: diacetate, bleached cotton, polyester, polyamide (nylon), acrylic, and wool. A B&W Tek i-Raman EX portable Raman spectrometer with 1064 nm laser excitation along with a fiber optic probe holder was used. The video microscope sampling accessory can be used for testing on thin fibers and is very useful for microsamples, and for looking at specific spots on a sample.

The identification test involves creating a library and comparing each individual fabric spectrum with the spectra in the library. The software BWID was used to generate the library as well as to conduct the identification. The resulting "Match" or "No Match" is based on HQI (hit quality index), which measures the level of correlation of the sample spectrum against a reference spectrum calculated by using the correlation coefficient algorithm. The HQI threshold for a "Match" result was set at 80, which indicates an 80% correlation score between the sample spectrum and the reference spectrum.

Four out of the six types of fabrics are unambiguously identified. The overlaid spectra for these four fabrics are shown in **Figure 1**. As demonstrated in the diagonal line in the comparison results of **Table 1**, there is clear differentiation to separate diacetate, bleached cotton, polyamide, and acrylic fabrics.



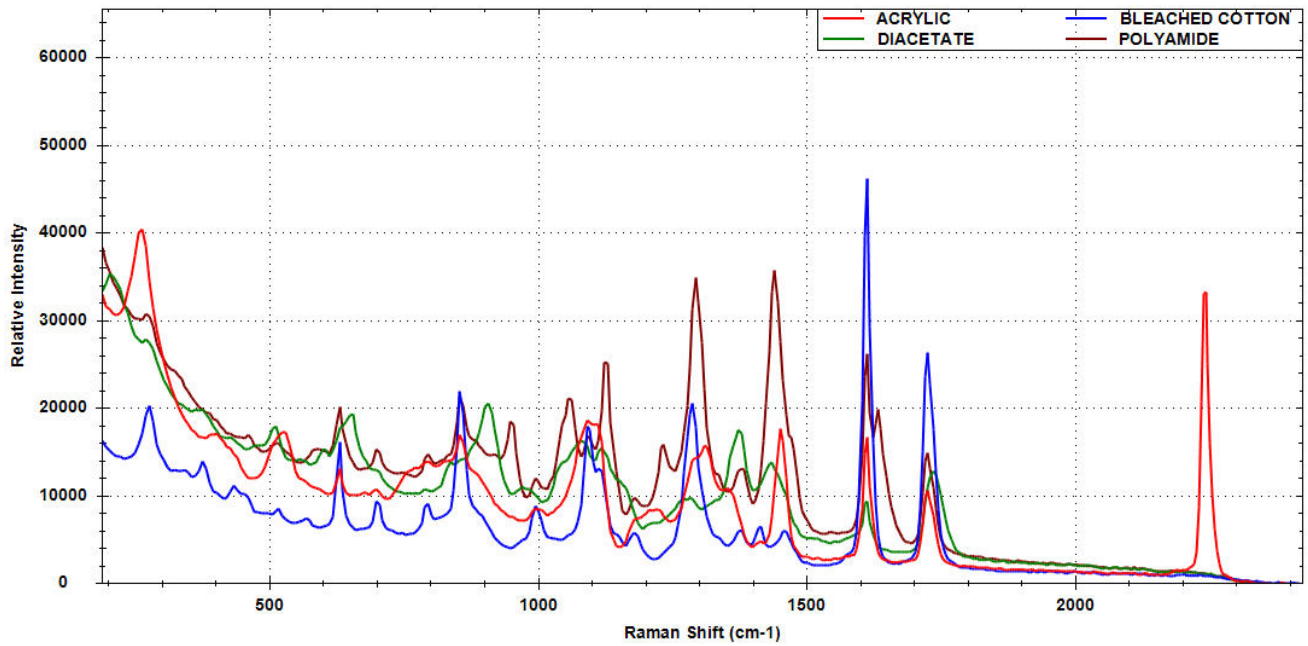


Figure 1. Overlay of spectra for acrylic, bleached cotton, polyamide, and diacetate

Library Sample \	Diacetate	Bleached Cotton	Polyamide	Acrylic	Polyester	Wool
Diacetate	Match (HQI=87.68)	No match	No match	No match	No match	No match
Bleached Cotton	No match	Match (HQI=94.08)	No match	No match	No match	No match
Polyamide	No match	No match	Match (HQI=91.98)	No match	No match	No match
Acrylic	No match	No match	No match	Match (HQI=93.97)	No match	No match
Polyester	No match	No match	No match	No match	Match (HQI=96.59)	2 nd Match (HQI=81.23)
Wool	No match	No match	No match	No match	2 nd Match (HQI=94.75)	Match (HQI=85.38)

Table 1. Identification results using BWID software

Polyester and wool are difficult to differentiate by HQI, as the Raman spectra are highly similar (Figure 2). However, since fibers made from animal hair contain protein keratin, an amide I band from the amino acid cysteine in the region from 1600-1690 cm^{-1} would be expected[1] for wool and not polyester. In addition, since cysteine provides the disulphide crosslinks that

hold the polymer chains in wool, a disulphide S-S band at 523 cm^{-1} would also be expected[1]. These two peaks that are distinctively related to animal proteins can be seen in the wool spectrum shown in Figure 2, with the amide I band at 1653 cm^{-1} and the S-S band at 523 cm^{-1} . These two unique peaks can be used to differentiate wool from polyester.

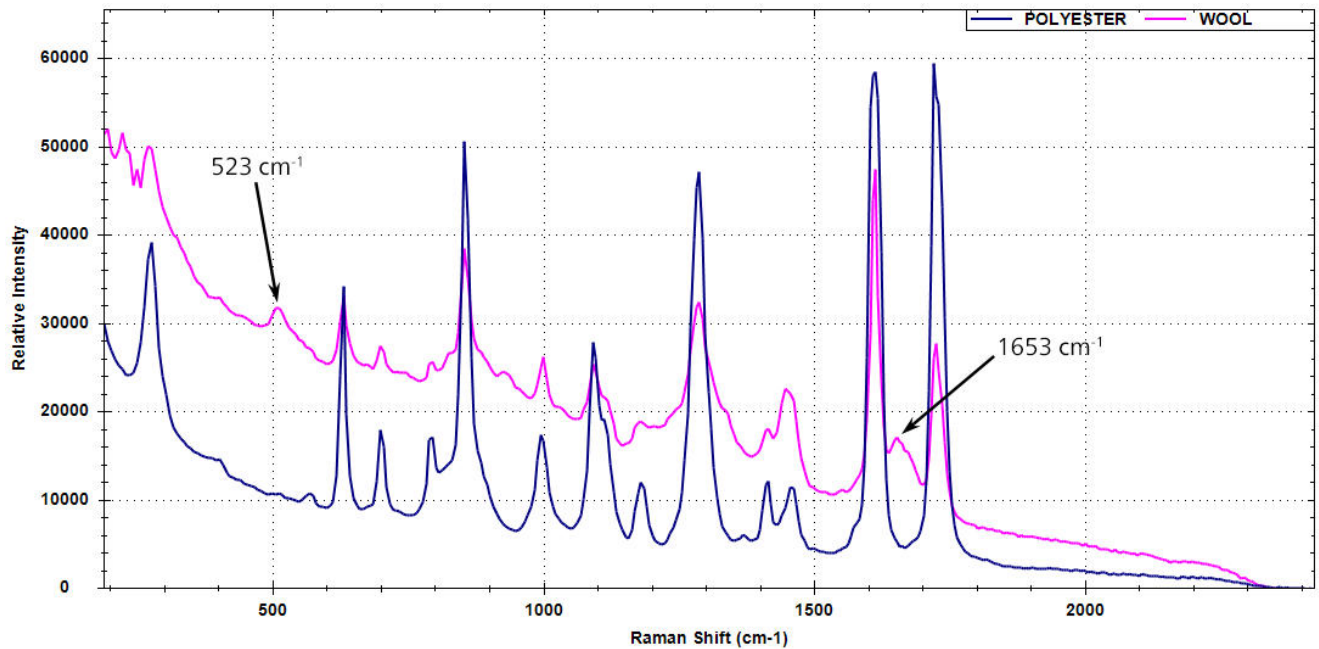


Figure 2. Overlay of spectra for wool and polyester

CONCLUSION

With unique discrimination power, Raman spectroscopy is a powerful technology that can be applied to forensic fabric and fiber analysis.

Identification of an unknown fabric is achieved in several minutes, making it a practical choice for rapid identification either on site or in the forensic lab.

REFERENCE

1. Li-Ling Cho. Identification of textile fiber by Raman microspectroscopy. J Forensic Science 2007; 6 (1):55-62

CONTACT

Metrohm Deutschland
In den Birken 3
70794 Filderstadt

info@metrohm.de


CONFIGURATION



i-Raman EX Tragbares Raman-Spektrometer

Das i-Raman[®] EX ist Bestandteil unserer preisgekrönten Serie der i-Raman tragbaren Raman-Spektrometer mit unserem patentierten CleanLaze[®]-Laser zur Anregung bei 1064 nm. Dieses tragbare Raman-Spektrometer nutzt einen hochempfindlichen InGaAs-Array-Detektor mit TE-Tiefkühlung, hohem Dynamikbereich und einem auf hohen Durchsatz ausgelegten Spektrografen. Es bietet ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis ohne Autofluoreszenz auszulösen, sodass eine breite Auswahl an Naturprodukten, biologischen Proben (z. B. Zellkulturen) und farbigen Proben gemessen werden kann.

Das i-Raman EX deckt einen Spektralbereich von 100 cm^{-1} bis 2500 cm^{-1} ab, was Messungen in der gesamten Fingerprint-Region ermöglicht. Die kleine Grundfläche des Systems, die leichte Bauweise und der geringe Energieverbrauch sorgen überall für die Möglichkeit, Raman-Analysen auf Forschungsniveau durchzuführen. Das i-Raman EX ist mit einer faseroptischen Sonde und einem XYZ-Verschiebetisch mit Sondenhalter ausgestattet. Es kann zusammen mit einer ganzen Reihe an Zubehör zur Probennahme eingesetzt werden, um die Messung unterschiedlichster Proben zu erleichtern. Für erweiterte Analysemöglichkeiten kann es mit unserer unternehmenseigenen multivariaten Analysesoftware BWIQ[®] oder der Identifikationssoftware BWID[®] betrieben werden. Mit dem i-Raman EX haben Sie immer eine hochpräzise Raman-Lösung für qualitative und quantitative Analysen ohne Fluoreszenz zur Hand.

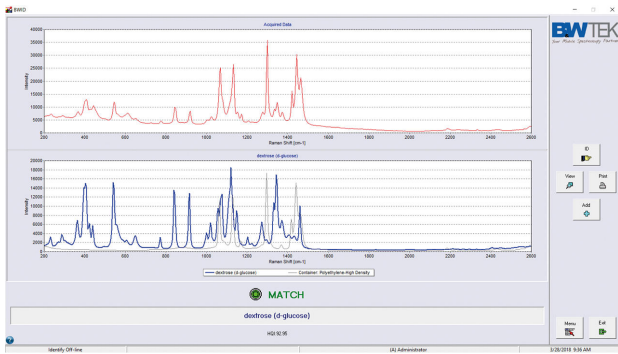

BWID Standard-Raman-ID-Software

Software zur Datenaufnahme, Materialidentifikation und Erstellung von Reports für die tragbaren Raman-Spektrometer von B&W Tek, die eine schnelle Identifikation oder Verifizierung von Materialien auf Grundlage von benutzererstellten Bibliotheken, urheberrechtlich geschützten Bibliotheken von B&W Tek sowie Bibliotheken von Drittanbietern ermöglicht. Inklusive Leistungsüberprüfung des Systems. Umfasst eine Benutzerlizenz. Kostenlose Upgrades sind für ein Jahr ab Kaufdatum inbegriffen.



Raman-Probennahmesystem mit Videomikroskop (1064 nm)

Probennahmesystem mit Videomikroskop zur Verwendung mit den Raman-Sonden von B&W Tek für Labor und Industrie. Inklusive eines Objektivs mit 20-facher Vergrößerung bei einem Arbeitsabstand von 16 mm. Bietet manuelle Grob- und Feineinstellung auf den X-, Y- und Z-Achsen, koaxiale LED-Beleuchtung für die Zielausrichtung, Videokamera für die Probenbetrachtung und ist kompatibel mit Standard-Mikroskopobjektiven. Sonde ist nicht enthalten und separat erhältlich. 1064 nm-Konfiguration.

BAC151C-1064