



Application Note AN-H-146

# Ammonium and urea nitrogen in NPK fertilizers

## Fast, simultaneous determination of both components by thermometric titration

Fertilizers are applied in the agricultural sector to provide more essential nutrients to growing plants. The so-called «NPK» fertilizers provide such nutrients to plants with its three main components (N – nitrogen, P – phosphorous, K – potassium). In fertilizers, nitrogen is mainly provided in three forms: as ammonium nitrate ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ), ammonia ( $\text{NH}_3$ ), and urea ( $\text{H}_2\text{NCONH}_2$ ). Due to the different physical and chemical properties, uptake and release kinetics,

mixtures of the nitrogen-providing compounds are used. Using such mixtures reduces the problem of fertilizer burns on plants, caused by an excess of nitrogen.

Determination of the individual nitrogen-contributing components is often laborious work. Thermometric titration offers the possibility to rapidly determine the amount of ammoniacal nitrogen and urea nitrogen in a single titration using sodium hypochlorite as titrant.

## SAMPLE AND SAMPLE PREPARATION

This application is demonstrated on two different solid NPK fertilizers. For the analysis, stock solutions of the solid fertilizers are prepared. The solid fertilizers

are weighed accurately into a volumetric flask and dissolved in warm water.

## EXPERIMENTAL

The analysis is carried out with an 859 Titrotherm equipped with a Thermoprobe. To avoid handling chemicals manually, all solutions are automatically dosed using an 846 Dosing Interface.

The titration is based on the reaction between sodium hypochlorite and ammonium nitrogen and urea, respectively. Bromide is used as a catalyst for the reaction. As urea reacts more slowly with hypochlorite than ammoniacal nitrogen, two endpoints are obtained.



**Figure 1.** 859 Titrotherm setup for the thermometric titration and the data evaluation performed with tiamo.

Prior to the titration, the sample is pipetted into the titration vessel. All required auxiliary solutions are dosed automatically, and the vessel is filled up with deionized water to a total volume of 50 mL.

Afterwards, the solution is titrated until after the second exothermic endpoint with sodium hypochlorite.


## RESULTS

Titration curves with two endpoints are obtained if the sample includes ammonium and urea. One exemplary titration curve is shown in **Figure 2**. Depending on the urea amount in the sample,

additional spiking of the sample can improve the detection of urea, and ensures that a second endpoint is found.

**Table 1.** Results of the thermometric titration of solid NPK fertilizers containing urea and ammonium (n = 6).

	NPK 17-8-10	NPK 15-15-15
$w(N_{\text{Ammonia}}) / \%$	11.31	11.98
$s(\text{rel})_{\text{Ammonia}} / \%$	0.70	0.31
$w(N_{\text{Urea}}) / \%$	4.51	2.03
$s(\text{rel})_{\text{Urea}} / \%$	0.69	2.35

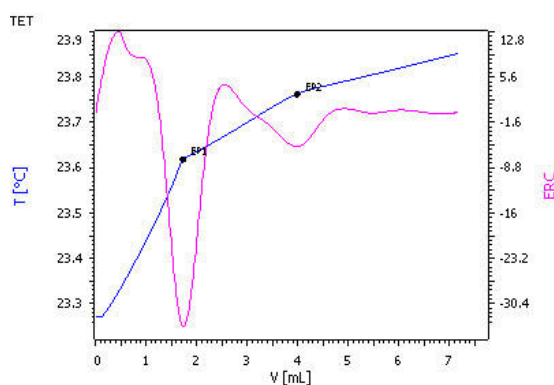

**Figure 2.** Titration curve of thermometric determination of ammonium (EP1) and urea (EP2) in NPK 17-8-10 fertilizer.

## CONCLUSION

Thermometric titration is a very fast and accurate method to determine the ammonium and urea content in fertilizers in one titration. The method

allows a differentiation of these two components with a determination time of **less than 3 minutes**.

Internal reference: AW TI CH1-1299-112019

## CONTACT

Metrohm Suisse SA  
 Industriestrasse 13  
 4800 Zofingen

info@metrohm.ch

## CONFIGURATION



### 859 Titrotherm complet avec tiamo™

Titreur assisté par ordinateur pour le titrage thermométrique. Avec accessoires complets pour le titrage (burette de 10 mL, station de titrage avec agitateur à hélice, Thermoprobe, récipient de titrage et tiamo™ light).




### 846 Dosing Interface

Unité de commande compatible USB pour le raccordement de quatre 800 Dosino ou 805 Dosimat maximum pour les tâches de distribution et de manipulation des liquides (LQH). Pour la manier, il est nécessaire d'utiliser un Touch Control ou de la connecter à un ordinateur avec logiciel OMNIS, tiamo™, MagIC Net, viva ou 797 VA Computrace installé.



### 800 Dosino

Moteur de burette avec système de lecture/écriture pour les Unités de distribution intelligentes. Avec câble attendant (150 cm).

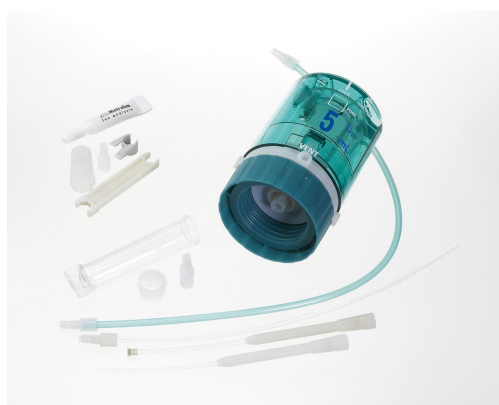

### 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



### 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



### 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.