



Application Note AN-R-009

# Oxidation stability of fatty acid methyl esters (FAME, biodiesel)

Reliable and accurate determination of the oxidation stability of biodiesel according to EN 15751

Biodiesel, also known as fatty acid methyl esters (FAME), is used just like petroleum-based diesel. Fatty acid methyl ester biodiesel can also be blended with petroleum diesel fuel in any ratio for use in diesel engines [1]. Biodiesel fuel produces fewer emissions, is sustainable, biodegradable, and environmentally friendly, and has good lubricating properties. Transesterification of glycerides in vegetable oils, animal fats, or organic waste with monohydric alcohols (e.g., methanol or ethanol) can make FAME.

Antioxidants, whether natural or added (e.g., ascorbyl palmitate), inhibit FAME autoxidation and help to prolong shelf life. Both the quality and antioxidant capacity of biodiesel need to be monitored. One of the most important parameters to measure is oxidation stability. The 893 Professional Biodiesel Rancimat determines the oxidation stability of biodiesel according to EN 14112, EN 15751, and EN 16568 standards.

## SAMPLE AND SAMPLE PREPARATION

This application is demonstrated on biodiesel with and without added antioxidants (Table 1).

For measurements of biodiesel with antioxidants, 10

## EXPERIMENTAL


The determinations are carried out using an 893 Professional Biodiesel Rancimat (Figure 1).

An appropriate amount of sample is weighed into the reaction vessel, and then the analysis is started.


The biodiesel sample is exposed to an airflow at a constant temperature of 80–150 °C using the biodiesel Rancimat method. In this way, highly volatile secondary oxidation products are transferred along with the airflow into the measuring vessel where they are absorbed in the measuring solution.

The conductivity of the measuring solution is registered continuously. The formation of secondary oxidation products leads to increased conductivity of the solution. A good indicator for the oxidation stability, the «induction time», is the amount of time until this marked conductivity increase occurs (Figure 2).

mg of ascorbyl palmitate was added to 100 mL of biodiesel.

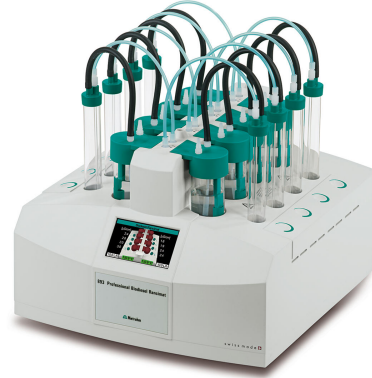

**Figure 1.** 893 Professional Biodiesel Rancimat equipped with measuring and reaction vessels for the determination of oxidation stability of biodiesel.

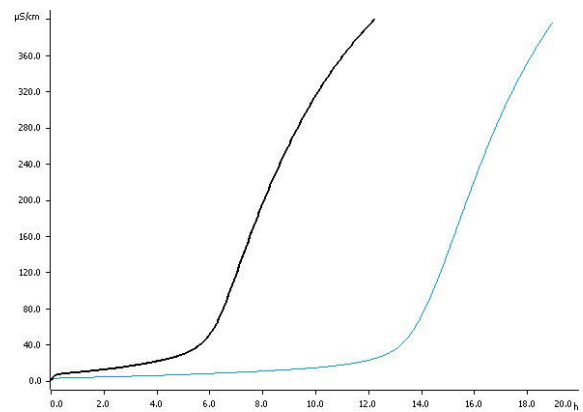

**Figure 2.** Determination of the oxidation stability of biodiesel both with (blue curve) and without (black curve) added antioxidants (100 mg/L ascorbyl palmitate) at 110 °C.

**Table 1.** Results for the oxidation stability of biodiesel with and without added antioxidants (100 mg/L ascorbyl palmitate) using the 893 Professional Biodiesel Rancimat at 110 °C.

Sample (n = 4)	Mean value in h	SD(rel) in %
Biodiesel without added antioxidant	6.15	1.1
Biodiesel with added antioxidant	13.55	0.9

## CONCLUSION

The oxidation stability of biodiesel as well as blends of biodiesel is an important quality control parameter in a series of standards defining the minimum quality requirements for FAME (fatty acid methyl ester) analysis in biodiesel marketed as vehicle fuel or heating oil.

In addition, a comparison of biodiesel with and without the presence of added antioxidants can be made by determining oxidation stability according to EN 15751. This allows conclusions to be drawn about the shelf life, the effect of antioxidants, durability, and comparative value between samples which are still stable and those which are already rancid.

With the Rancimat, this quality parameter can easily and simultaneously be determined for eight different

samples at a time, increasing quality control laboratory throughput. The status of the Rancimat is shown with a built-in display. Buttons for each measuring position on the instrument allow individual measurements to be started. The use of practical disposable reaction vessels and dishwasher-safe accessories reduces cleaning to a minimum. This saves time and money and significantly improves accuracy and repeatability.

Biodiesel samples with and without antioxidant addition (100 mg/L ascorbyl palmitate) have been tested in this Application Note. The determination worked superbly and has shown that biodiesel with antioxidant additives has a significantly higher induction time and therefore longer shelf life.

## REFERENCES


1. Metrohm AG. Oxidation Stability of Diesel, Biodiesel, and Blends – Reliable Oxidation Stability Measurements in Diesel, Biodiesel, and Blends According to EN 14112, EN 15751, and EN 16568; [AN-R-034](#); Metrohm AG: Herisau, Switzerland, 2024.

## CONTACT

Metrohm France  
13, avenue du Québec - CS  
90038  
91978 VILLEBON  
COURTABOEUF CEDEX

[info@metrohm.fr](mailto:info@metrohm.fr)

## CONFIGURATION

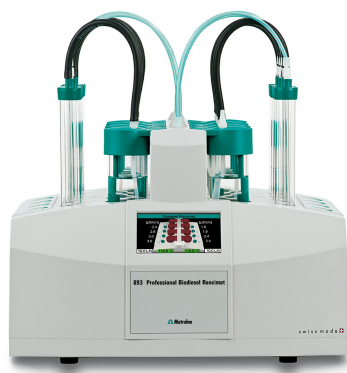

### 893 Professional Biodiesel Rancimat

Le 893 Professional Biodiesel Rancimat est un système d'analyse permettant une détermination simple et fiable de la stabilité à l'oxydation du biodiesel (ester méthylique d'acides gras, FAME) et des mélanges de biodiesel selon les normes EN 14112, EN 15751 et EN 16568. Doté de 8 positions de mesure réparties dans 2 blocs de chauffage. L'afficheur intégré indique l'état de l'appareil et de chacune des positions de mesure. Les touches de démarrage pour chaque position de mesure permettent le démarrage de la mesure sur l'appareil. Des récipients à réaction à usage unique et des accessoires lavables en machine réduisent les coûts et le travail de nettoyage à un minimum. Ceci fait économiser du temps et de l'argent tout en améliorant l'exactitude et la reproductibilité de manière considérable.

Tous les accessoires nécessaires aux déterminations sont fournis. Le logiciel StabNet est requis pour le contrôle de l'appareil, l'enregistrement des données et leur évaluation, ainsi que pour leur sauvegarde.



### Équipement pour la détermination de la correction de température pour les Biodiesel Rancimat.

Set permettant un ajustement exact de la température



### Consumable Kit Biodiesel Rancimat

Ensemble comprenant les principaux consommables pour le Biodiesel Rancimat.